

Easy-Touch[®] HealthPro[™]

Glucose Monitoring System

Quick Reference Guide

This guide is intended to be used as a quick reference to the EasyTouch[®] HealthPro[™] User Manual. Please read the complete manual before using the EasyTouch[®] HealthPro[™] Glucose Monitoring System.

Note: The EasyTouch[®] HealthPro[™] Glucose Monitoring System does not include Test Strips and Control Solution and they can be purchased separately.

Battery Installation



Step 1: To begin, place the meter on a flat surface and take the back of the battery cover off the meter.



Step 2: Both batteries are to be inserted into the meter with the Positive (+) side of the battery facing upward, away from the prongs.



Step 3: Replace the battery cover. The batteries will lock into place once the battery cover is slid back onto the meter.

Setting Up Your Meter




Step 1: Power On
Press "⏻" for at least 3 seconds.



Step 2: User Activity Option
After pressing and releasing either "▲" or "▼" buttons to turn the User Activity Option on/off, confirm with "⏻". For more detail, see page 16 of User Manual



Step 3: Year
After pressing and releasing either "▲" or "▼" buttons to set the year, confirm with "⏻".

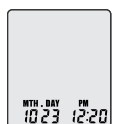


Step 4: Date/Time
After pressing and releasing either "▲" or "▼" buttons to set the date and time, confirm each with "⏻".



Step 5: Test Unit
Press and release either "▲" or "▼" buttons to select mg/dL. Confirm it with "⏻". The correct units of the measurement in the U.S. are mg/dL.



Step 6: Temperature Unit
Press and release either "▲" or "▼" buttons to set °C or °F, confirm with "⏻".

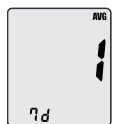

Step 7: Days for Average
After pressing and releasing either "▲" or "▼" buttons to set the number of days, confirm with "⏻".



Step 8: Alarm On/Off
After pressing and releasing either "▲" or "▼" buttons to turn the alarm on/off, confirm with "⏻".




Step 9: Alarm Time
After pressing and releasing either "▲" or "▼" buttons to set the alarm hour and minute, confirm with "⏻".



Step 10: Alarm
After programming the number of desired alarms (5 alarms possible), confirm with "⏻".

Note: Steps 1–10 of "Setting Up Your Meter" must be completed in order for your meter to perform a test for the first time.

Performing a Test

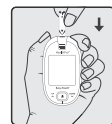

Step 1: Insert a test strip firmly into the test port. The meter will automatically turn on and read the test strip code. A blinking test strip "⏻" will appear when the meter is ready for testing.



Step 2: Place blood sample onto the end of the test strip. When the test strip has collected the blood sample (0.5µL), the meter will beep and automatically start counting down.



Step 3: After 5 seconds, your blood glucose result will appear on the display and will automatically be stored into the meter's memory. The meter will automatically turn off.

Reviewing Your Results

The EasyTouch[®] HealthPro[™] Meter stores up to 365 test results in its built-in memory, along with the average sugar level for the number of days you preset the glucose test meter to calculate.



Step 1: To retrieve your test results, press and release the "⏻" button. Most recent results appears first. Press the "▲" and "▼" buttons to navigate through your previous test results.



Step 2: To retrieve your test averaging, press and release the "▲" button when viewing your most recent test result. To switch between day-averaging presets, press the "▲" and "▼" buttons.

Display Messages



Meter may be defective. Reboot meter with new batteries.



Test strip may be contaminated or used. Retest with new test strip.



Insufficient amount of sample blood placed on the test strip. Retest with new test strip.




Test strip is damaged. Retest with new test strip.



Blood sample is placed on the test strip before the symbol for blood blinks.




Color bars on the back of strip are dirty, bad or there is too much light. Retest with new test strip.

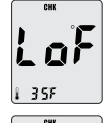

Ambient temperature is less than 50°F (10°C). Wait 10 minutes and retest with new test strip.



Ambient temperature is over 104°F (40°C). Wait 10 minutes and retest with new test strip.

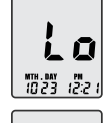

Test result is lower than 20mg/dl. Repeat test to ensure accurate results.



Test result is higher than 600mg/dl. Repeat test to ensure accurate results.

Please refer to pages 39-41 in the EasyTouch[®] HealthPro[™] User Manual for additional information.

For Questions or Comments, call MHC Customer Support at (877) 358-4342, Monday thru Friday, 9am to 5pm EST or visit us online at MHCmed.com

REF INFM28BET
IMC00872
Rev. 2021-11-03

Easy-Touch[®] HealthPro[™]

Glucose Monitoring System

Guía de Referencia Rápida

El propósito de esta guía es para usarla como una referencia rápida del manual de usuario de EasyTouch[®] HealthPro[™]. Por favor consulte el manual completo antes de usar el EasyTouch[®] HealthPro[™] monitor de glucosa.

Nota: El sistema EasyTouch[®] HealthPro[™] monitor de glucosa no incluye las tiras de prueba ni la solución de control. Ambas se pueden comprar por separado.

Instalación de las pilas



Paso 1: Para empezar, coloque el glucómetro en una superficie plana y retire la tapa de la batería del glucómetro.



Paso 2: Las dos pilas se deben introducir en el glucómetro con el lado positivo (+) de la pila hacia arriba, separadas de las patillas.



Paso 3: Vuelva a colocar la tapa. Las pilas se colocarán en su sitio cuando vuelva a colocar la tapa del glucómetro.

Configuración de su glucómetro



Paso 1: Encendido
Pulse "⏻" durante 3 segundos



Paso 2: Opción de actividad del usuario
Pulse los botones "▲" o "▼" para activar o desactivar la opción de actividad del usuario y confirme pulsando "⏻". Para obtener más información, consulte la página 16 del Manual de usuario



Paso 3: Año
Pulse los botones "▲" o "▼" para configurar el año y confirme pulsando "⏻".




Paso 4: Fecha/hora
Pulse los botones "▲" o "▼" para configurar la fecha y la hora, y confirme pulsando "⏻".



Paso 5: Unidad de medida del test
Pulse y libere los botones "▲" o "▼" para seleccionar mg/dL. Confirme pulsando "⏻". La unidad de medida correcta en los EE.UU. es mg/dL.



Paso 6: Unidad de medida de la temperatura
Pulse los botones "▲" o "▼" para configurar °C o °F, y confirme pulsando "⏻".

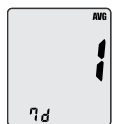


Paso 7: Días para la media
Pulse los botones "▲" o "▼" para configurar el número de días, y confirme pulsando "⏻".



Paso 8: Activar/Desactivar la alarma
Pulse los botones "▲" o "▼" para activar o desactivar la alarma, y confirme pulsando "⏻".




Paso 9: Hora de la alarma
Pulse los botones "▲" o "▼" para configurar la hora y los minutos de la alarma, y confirme pulsando "⏻".

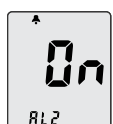

Paso 10: Alarma
Una vez haya programado el número de alarmas que desee (hasta 5 alarmas), confirme pulsando "⏻".

Nota: Para poder realizar una prueba por primera vez, se deben realizar los pasos 1 a 10 de la sección "Configuración de su glucómetro".

Hacer una Prueba

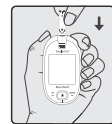

Paso 1: Insertar una tira firmemente en el puerto de prueba. El medidor se prenderá automáticamente y leerá el código de la tira. Una tira parpadeando aparecerá "⏻" cuando el medidor está listo para la prueba.



Paso 2: Coloque una muestra de sangre al final de la tira. Cuando la tira de prueba ha recogido la muestra de sangre (0.5µL), el medidor emitirá un pitido y comenzará automáticamente una cuenta regresiva.



Paso 3: Después de 5 segundos, su resultado de glucosa de sangre aparecerá en la pantalla y se almacenará automáticamente en la memoria del medidor. El medidor se apagará automáticamente después.

Revisar los Resultados

El medidor EasyTouch[®] HealthPro[™] almacena hasta 365 resultados de prueba en la memoria incorporada, junto con el nivel promedio de azúcar, para el número de días que predetermina el medidor de glucosa para el cálculo.



Paso 1: Para recuperar los resultados de la prueba, presione y suelte el "⏻" botón. Los resultados más recientes aparecerán primero. Presione el botón "▲" y "▼" para navegar a través de los resultados anteriores.



Paso 2: Para recuperar los promedios de las pruebas, presione y suelte el botón "▲" cuando viendo los resultados más recientes. Para cambiar entre los días de promedio preestablecidos, presione el botón "▲" y "▼".

Mostrar Mensajes



El medidor puede ser defectuoso. Reinicie el medidor con baterías nuevas.




La tira de prueba puede estar contaminada o usada. Vuelva a probar con una tira nueva.



Insuficiente cantidad de muestra de sangre colocada en la tira. Vuelva a probar con una tira nueva.




La tira de prueba está dañada. Vuelva a probar con una tira nueva.

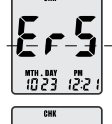


Muestra de sangre se coloca en la tira de prueba antes de que el símbolo de sangre parpadea.



La barra de color esta sucia, no esta buena o hay mucha luz. Vuelva a probar con una tira nueva.

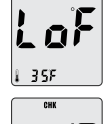


Temperatura ambiente es menos de 50°F (10°C). Espere 10 minutos y vuelva a probar con una tira nueva.

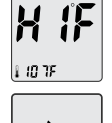

Temperatura ambiente es mas de 104°F (40°C). Espere 10 minutos y vuelva a probar con una tira nueva.



Resultado de la prueba es menor que 20mg/dl. Repita la prueba para asegurar resultados precisos.

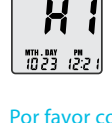

Resultado de la prueba es mas alto que 600mg/dl. Repita la prueba para asegurar resultados precisos.

Por favor consulte las páginas 39-41 en el manual usuario de EasyTouch[®] HealthPro[™] para información adicional.

Para Preguntas o Comentarios, llame a MHC servicio al cliente al (877) 358-4342, Lunes a Viernes, 9am a 5pm EST o visítenos en línea en www.mhcmcd.com.